

# Guide de Collecte d'Échantillons Urine




**Le patient ne doit pas avoir uriné au moins une heure avant la collecte de l'échantillon.**




Demandez au patient de collecter la **première urine** du matin (environ 20 à 30 ml) dans un récipient de collecte d'urine sans conservateur. La collecte d'un volume d'urine plus important peut entraîner la dilution de l'échantillon et diminuer la sensibilité du test. Les patientes ne doivent pas procéder à une toilette intime préalable.

## GUIDE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLONS D'URINE POUR :

- *Chlamydia trachomatis* (CT)
- *Neisseria gonorrhoeae* (GC)
- *Trichomonas vaginalis* (TV)

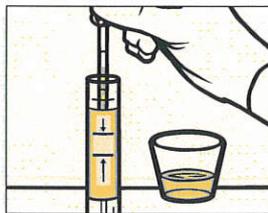

Retirez le bouchon du tube de transport d'échantillon et transférez 2 ml d'urine collectée dans le tube de transport d'échantillon d'urine au moyen de la pipette de transfert jetable fournie. Le volume d'urine ajouté est adéquat lorsque le niveau de liquide se situe entre les lignes noires situées sur l'étiquette du tube de transport d'échantillon d'urine.

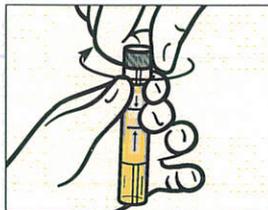

Refermez hermétiquement le tube de transport de l'échantillon d'urine. Il y sera fait maintenant référence sous le nom "d'échantillon d'urine traité".

## Transport et conservation des échantillons

- Une fois collectés, transportez et conservez les échantillons d'urine traités dans le tube de transport pour échantillons d'urine Aptima entre 2°C et 30°C jusqu'à la réalisation du test.
- Les échantillons d'urine doivent être testés avec les tests Aptima pour CT, GC et/ou TV dans les 30 jours qui suivent leur collecte.
- Si une durée de conservation supérieure est nécessaire, congelez-les entre -20°C et -70°C pendant 12 mois maximum après leur collecte.
- Les échantillons d'urine qui sont encore dans le récipient de collecte principal doivent être transportés au laboratoire à une température de 2°C à 30°C.
- Transférez l'échantillon d'urine dans le tube de transport pour échantillon d'urine Aptima dans les 24 heures qui suivent sa collecte.
- Conservez entre 2°C et 30°C et testez dans les 30 jours qui suivent la collecte.



# HOLOGIC®

Specializing in extraordinary

### Hologic France

11 Allée des Cascades BP 48042 Villepinte  
95912 Roissy CDG Cedex  
Tél. : +33 (0)1 48 17 83 70

[www.hologic.com](http://www.hologic.com) | [france@hologic.com](mailto:france@hologic.com)

Date de modification..... 11/ 2013

Référence commerciale..... Aptima

Destination du DMDIV..... Conforme à la destination au sens de la Directive 98/79/CE

Nom du Fabricant..... Gen-Probe Inc. USA

Instructions d'utilisation..... « Lire attentivement les instructions figurant dans le (les) manuel(s) d'utilisation du (des) système(s) et sur les étiquetages et/ou les notices d'utilisation des réactifs »

Numéro interne de référencement..... FRA-13-167-FR-A