


ORDRE DE PRÉLÈVEMENT

1 AVEC UNE AIGUILLE




2 AVEC UNE UNITE A AILETTES

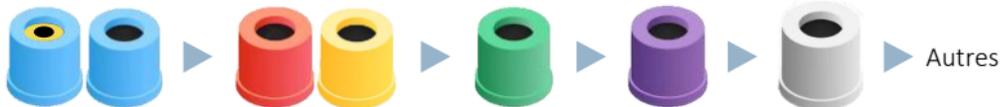

- Sans hémoculture*



- Avec hémocultures*

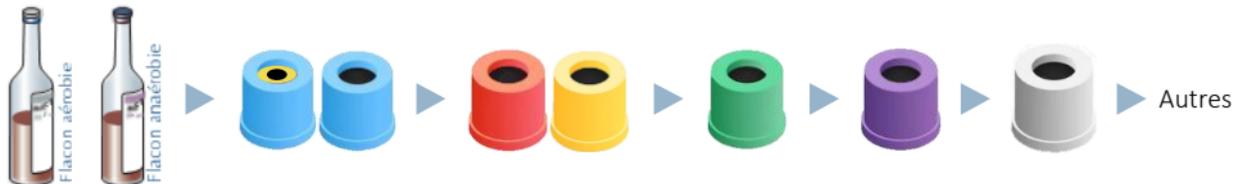



NEUTRE (sans additif)



CITRATE (empêche la coagulation de manière réversible)

REPLIR IMPERATIVEMENT JUSQU'AU TRAIT



CTAD (empêche la coagulation de manière réversible + inhibe l'activation des plaquettes)

REPLIR IMPERATIVEMENT JUSQU'AU TRAIT



SILICE (active la coagulation) sans gel



SILICE (active la coagulation) AVEC gel de séparation



HEPARINE (empêche la coagulation de manière irréversible)



EDTA (empêche la coagulation de manière irréversible)



FLUORURE (empêche la dégradation du glucose)

Recommandations pré-analytiques

- Vérifier les dates de **péremption** des tubes
- Ne jamais prélever sur le bras perfusé
- Si prélèvement sur cathéter veineux périphérique ou central, se référer au protocole du service (volume de purge, modalités de rinçage...)
- **Homogénéiser** par 5 retournements lents après prélèvement
- Identifier les tubes auprès du patient, **APRES** le prélèvement
- Veiller au bon **remplissage** des tubes et des flacons (très important pour les hémocultures)



Ne jamais transvaser d'un tube à l'autre